

رنگ قرمز دسته اصلی و آیتم های شماره خورده زیر مجموعه ها حساب می شوند:

دسته اول:

GBR:

- 1- GBR Kit III
 - 2- GBR Kit IV
 - 3- Membrane Screw set
 - 4- Block Bone Screw set
 - 5- Auto BoneTac System
 - 6- Titanium Core Set
 - 7-PRF Box
 - 8-Bone Chip Maker 2
 - 9-Bone Scraper
 - 10-Bone Mill
 - 11- Titanium Bone Tac Master
-

دسته دوم:

SINUS:

- 1- Split Master 3
 - 2- Bone Expander Kit
 - 3- Concave Bone Expander Kit
 - 4-Bone Crester Kit
 - 5-Saw Cover Kit 2
 - 6-Split Chisel & Ochsenbein Chisel
 - 7-Bone Well & Mallet
-

دسته سوم:

SPLITTING:

- 1- Masi Drill Kit 3
 - 2- Sinus Master Kit 3
 - 3- Hydro Lift System
 - 4-Osteotome-Rigid / Thermos
 - 5-Sinus Lift & Sinus Lift Crestal
-

دسته چهارم:

RESCUE:

- 1- Fixture & Screw Rescue Master
 - 2- Fixture & Screw Removal Kit
 - 3-Tissue Punch & Trepine Bur & Saw
 - 4- Tissue Punch
 - 5- Trepine Bur
 - 6-M-toque Driver Kit
 - 7-Implant Guide Kit
-

دسته پنجم:

Orthodontists:

- 1- Orthodontic Screw Set
 - 2- Orthodontic Tool Set
 - 3- Orthodontic Plate Set
-

قسمت اول

GBR:

1- GBR Kit III

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

GBR KIT Membrane Fixed Screw With Membrane Tac Combo Kit

این کیت شامل ۱۸ عدد اسکرو با قطرهای ۲/۱، ۴/۱، ۵/۲ و طولهای ۳، ۳/۵ و ۴ میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای ۱۸ عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد. تکها نیز دارای یک بن تک هلدر جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممبراین با تک بصورت چکشی می باشند

* همراه یک دسته جهت بکار گیری شفت دستی

* دارای شفت موتوری که سر آنکل بسته میشود

* شامل یک عدد پابلوت دریل که 1mm می باشد که میتوان قبل از استفاده از اسکرو در استخوان سوراخی را جهت راحتی پیچ کردن اسکرو ایجاد کرد.


این کیت محصول MCT (مسترکورت) کره بوده و دارای FDA آمریکا می باشد.

لینک سایت : https://www.mctbio.com/GBR/TentingScrew_set.html

GBR-KIT III (Screw 30EA Bone Tac :18EA)

Membrane fixation screw with membrane tac combo kit.

GBR-KIT III
GBR-03

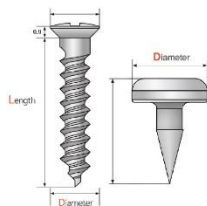

Code	D*L	Quantity
AU-12-003	∅1.2 X 3	10EA
AU-12-004	∅1.2 X 4	10EA
AU-14-004	∅1.4 X 4	10EA
BT-3.5	∅2.5 X 3.5	9EA
BT-4.5	∅2.5 X 4.5	9EA



+



Bone Tac Holder
BT-HD



2-GBR Kit IV

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

GBR KIT Membrane Fixation Screw With Membrane Tac Combo Kit

این کیت شامل ۳۰ عدد اسکرو با قطرهای ۲/۱، ۴/۱ و طولهای ۳ و ۴ میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد. همچنین این کیت دارای ۱۲ عدد تک کوتاه و بلند جهت ممبراین فیکسیشن دارد. تکها نیز دارای یک بن تک هلدر جهت برداشتن تک و فیکس کردن ممبراین با تک بصورت چکشی می باشند

*دارای یک دسته جهت بکار گیری شفت دستی

*همراه با شفت موتوری که سر آن گل بسته میشود

*شامل یک عدد پایلوت دریل که 1mm می باشد که میتوان قبل از استفاده از اسکرو در استخوان سوراخی را جهت راحتی پیچ کردن اسکرو ایجاد کرد.


این کیت محصول MCT (مسترکورت) کره بوده و دارای FDA آمریکا می باشد.

لینک سایت: https://www.mctbio.com/GBR/GBR_Kit_IV.html

GBR-KIT IV (Screw 30EA Bone Tac :12EA)

Membrane fixation screw with membrane tac combo kit.

GBR-KIT IV
GBR-04

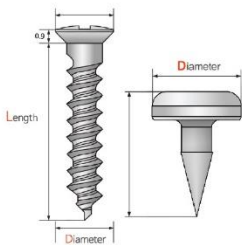

Code	D*L	Quantity
AU-12-003	Ø1.2 X 3	5EA
AU-12-004	Ø1.2 X 4	5EA
AU-14-004	Ø1.4 X 4	5EA

Code	D*L	Quantity
AU-16-008	Ø1.2 X 3	5EA
AU-16-010	Ø1.6 X 10	5EA
AU-18-010	Ø1.8 X 10	5EA
BT-4.5	Ø2.5 X 4.5	12EA



3-Membrane Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو

GBR KIT Membrane Fixed Screw Set

این کیت شامل ۵۴ عدد اسکرو با قطرهای ۱/۲ و ۱/۴ و طولهای ۳ و ۴ میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

* دارای یک دسته جهت بکار گیری شفت دستی

* شامل شفت موتوری که سر آن گل بسته میشود

* همراه با یک عدد پایلوت دریل که 1mm می باشد که میتوان قبل از استفاده از اسکرو در استخوان سوراخی را جهت راحتی پیچ کردن اسکرو ایجاد کرد .

این کیت محصول MCT (مسترکورت) کره بوده و دارای FDA آمریکا می باشد.


لینک سایت: https://www.mctbio.com/GBR/MembraneFixedScrew_set.html

11

For GBR

Membrane Fixed Screw Set (Screw 54EA)

Consist of short length screws (3 & 4 mm) for membrane fixation (Ti-mesh).

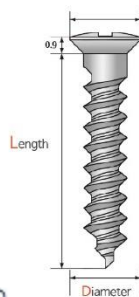

Fixing Membrane Screw

Code	D*L	Quantity
AU-12-003	Ø1.2 X 3	18EA
AU-12-004	Ø1.2 X 4	18EA
AU-14-004	Ø1.4 X 4	18EA



Membrane Fixed Screw Set

TMS-02



4- Block Bone Screw set

کیت GBR جهت فیکس کردن ممبراین توسط اسکرو و تک

GBR KIT Block Bone Screw Set

این کیت شامل ۵۴ عدد اسکرو با قطرهای ۶/۱، ۸/۱، ۲/۱۰ و طولهای ۶، ۸ و ۱۰ میل جهت فیکس کردن ممبراین می باشد.

*دارای یک دسته جهت بکار گیری شفت دستی

*شامل شفت موتوری که سر آنگل بسته میشود


*همراه با یک عدد پایلوت دریل که 1/2mm می باشد که میتوان قبل از استفاده از اسکرو در استخوان سوراخی را جهت راحتی پیچ کردن اسکرو ایجاد کرد.

این کیت محصول MCT (مسترکورت) کره بوده و دارای FDA آمریکا می باشد.

لینک سایت: https://www.mctbio.com/GBR/BlockBoneScrew_set.html

Block Bone Screw Set (Screw 54EA)

Consist of long length screws (8, 10, 12mm) for block bone fixation or Tenting purpose.

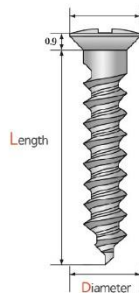

Block Bone Screw

Code	D*L	Quantity
AU-16-008	Ø1.6 X 6	6EA
AU-16-010	Ø1.6 X 8	6EA
AU-16-012	Ø1.6 X 10	6EA

Code	D*L	Quantity
AU-18-008	Ø1.8 X 6	6EA
AU-18-010	Ø1.8 X 8	6EA
AU-18-012	Ø1.8 X 10	6EA

Code	D*L	Quantity
AU-20-008	Ø2.0 X 6	6EA
AU-20-010	Ø2.0 X 8	6EA
AU-20-012	Ø2.0 X 10	6EA



Block Bone Screw Set



5- Auto BoneTac System

اتوماتیک بون تک محصول جدید MCT (مسترکورت) جهت فیکس کردن ممبراین

Automatic bone tac

این سیستم شامل یک تفنگ جهت برداشتن تک و شلیک آن داخل استخوان فک بیمار جهت فیکس کردن ممبراین است. و به انتخاب مشتری، شامل یک کیس مخصوص تک و ۲۱ عدد تک کوتاه (۳.۵ میلیمتر) و یا ۲۱ عدد تک بلند (۴.۵ میلیمتر)

جهت استفاده از این سیستم ابتدا باید شاسی بالایی تفنگ را محکم کشیده تا تفنگ به مرحله قفل برود و سپس با سر تفنگ تگ را از داخل کیس برداشته و در نهایت شاسی روی بدنه تفنگ را فشار داده تا تک در محل مورد نظر شلیک شود

این محصول کره ای و دارای FDA امریکا میباشد

لینک سایت:

<https://www.mctbio.com/Bonetac/bonetac/bonetac5.html>



6- Titanium Core Set

تیتانیوم مشهای mct

این تیتانیوم مش ها در ابعاد

۲۰×۱۵


۳۰×۳۰

۳۰×۶۰

میباشد.

این تیتانیوم مشها دارای ضخامت ۰.۱ میباشند و همچنین دارای سوراخهایی بروی خود در ابعادی با قطر ۰.۲ و ۱.۳ میل میباشند

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/Mesh/mesh/mesh4.html>

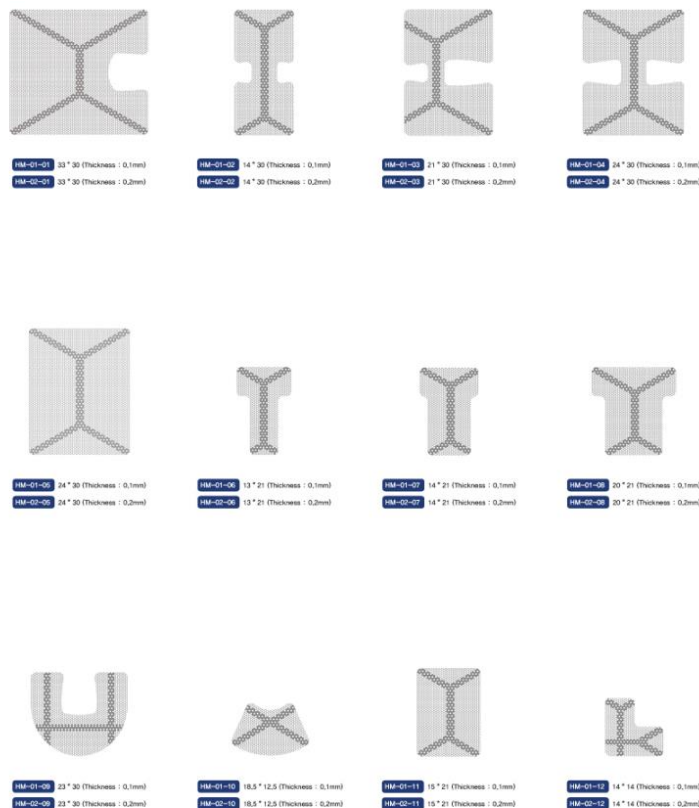

7-PRF Box

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail13.html>

PRF-BOX

(Fibrin Compressor – Plate / Rich / Fibrin)

Character of PRF BOX

1. Prevent infection by not using gauze.
2. Growth Factor collected by PRF BOX and used in Bone Grafting is helpful in the formation of new bone.



Lid of Case
PRF-01-03



Press Board
PRF-01-01



PRF-BOX
PRF-BOX



Bottom Board & Case
PRF-01-02 PRF-01-04

Direction for Use

1. Draw 5cc blood from patients.
2. Extract PRF Gel by centrifuging the blood sample.
3. Put the yellow part of PRF Gel into the PRF Box and press by press.
4. Use PRF membrane which has been separated from the liquid.



8-Bone Chip Maker 2

کیت بن چیپ میکر یا بن کالکتور MCT (مسترکورت) جهت برداشتن استخوان autogenus و تحویل آن بصورت پودر شده و یا بلاک بکار می‌رود. این کیت شامل دریل‌هایی با قطرهای ۲/۲،۵/۹،۴/۴،۳/۳ میلی‌متر و همچنین شامل استایرهای ۵/۵،۷،۱۰،۱۱ میلی‌متری جهت کنترل میزان و عمق برداشت استخوان می‌باشد. این سیستم دارای یک ریمور جهت خالی کردن استخوان برداشت شده توسط دریلها است. یکی از ویژگی‌های این کیت وجود ترفاین جهت برداشت استخوان بصورت بلاک میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail1.html>

New Bone Chip Maker

BCM2-01

Composition of BCM2-01



BCM2-01 New Bone Chip Maker

Detail View



Bone collection greatly increased to more than 30%

Component



9-Bone Scraper


بن اسکرپر های mctbio

این بن اسکرپرها در دونوع مستقیم و زاویه دار میباشند و همچنین دارای یک تیغه جهت تراشیدن بروی استخوان و جمع آوری آن در محفظه ی تعبیه شده ی خود هستند. این تیغه قابل جداسازی و تعویض است. این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

منبع: داخل کاتالوگ برداشته شود.

Bone Scraper

It Scratches bone to collect and be sterilized as well as economically used with replaceable tip

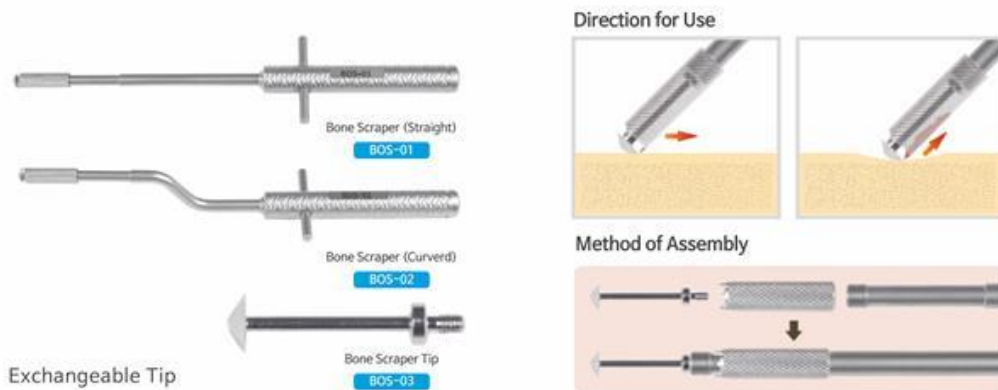

10-Gold Mill (Bone Mill)

بن میل کوچک یا بزرگ MCT (مستر کورت)

این بن میلها جهت خورد کردن استخوان بلاک برداشته شده مورد استفاده قرار میگیرد. بن میل بزرگ دارای ارتفاع 72 mm و بن میل کوچک دارای ارتفاع 44mm میباشد. عرض بن میل کوچک ۳۰ میل و بن میل بزرگ ۳۸ میل میباشد.

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail21.html>


Composition of Gold Mill



Size of Gold Mill



Photo of Surgery

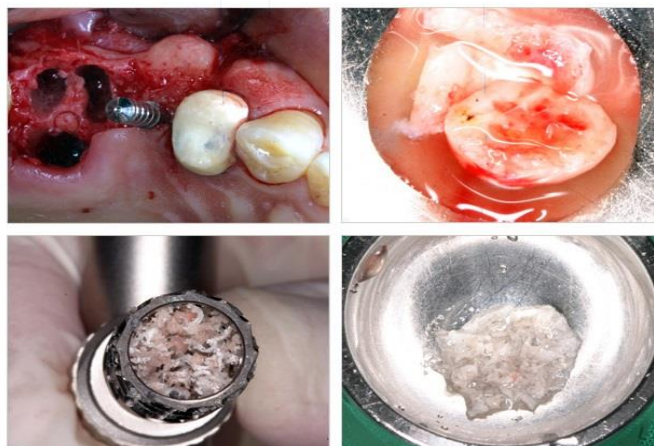

11- Titanium Bone Tac Master

کیت تیتانیوم بن تک مستر محصول MCT (مسترکورت) کره

این کیت جهت فیکس کردن ممبراین مورد استفاده قرار میگیرد و شامل دو عدد کیس ۲۱ عددی از تک کوتاه (3/5mm) و بلند (4/5mm) میباشد. همچنین این کیت شامل یک عدد بن تک هلدر جهت استفاده از تک ها و یک عدد mallet میباشد.

محصولات MCT دارای FDA آمریکا میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/Bonetac/bonetac/bonetac1.html>


Titanium Bone Tac Master

(Bone Tac 3.5: 40EA, Bone Tac 4.5: 40EA)



Titanium Bone Tac Master

TBM-03

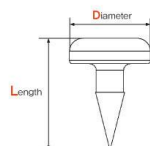

Bon Tac

Code	D*L	Quantity
BT-3.5	Ø2,5 X 3,5	40EA
BT-4.5	Ø2,5 X 4,5	40EA



BT-3.5 Bone Tac 3.5mm



BT-4.5 Bone Tac 4.5mm



BT-HD Bone Tac Holder



قسمت دوم

SINUS:

1- Split Master 3

کیت اسپلیت ماستر MCT (مسترکورت)

این کیت شامل دو ردیف دریل اکسپندر **Convex** و **Concave** میباشد که جهت اکسپند کردن استخوان بمنظور کاشت ایمپلنت بکار می‌رود. قابل ذکر است اکسپندرهای **concave** یک تا دو میلی متر استخوان را بیشتر ذخیره کرده و کمتر به سینوس نزدیک میشود. این کیت شامل ۳ عدد اسپریدر و اچارهای اسپریدر جهت باز کردن استخوان در محل برش در سطح ریج استخوان بکار می‌رود (که توسط دو دیسک اره ای در سطح ریج و باکال ایجاد شده است). این کیت همچنین شامل آداپتور های دستی و موتوری و همچنین رچت برای استفاده از دریل‌های اکسپند میباشد. در این کیت همچنین یک بون کریر جهت تزریق پودر استخوان وجود داشته و در اخر زیر این کیت چهار عدد چیزل مستقیم و زاویه دار ۴ و ۶ میلی متری جهت باز کردن استخوان وجود دارد. این محصول کره ای و دارای FDA امریکا میباشد. لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail9.html>


Split Master III

SSM-03

Composition of SSM-03



SSM-03 Split Master 03

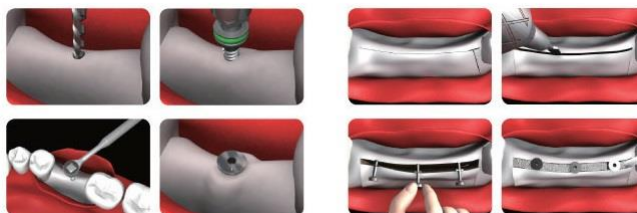

Split Master II

Pilot Drill / Bone Expander




SAW



22mm

Spreader + Screw

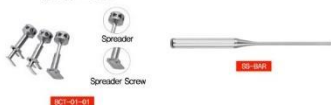

Bone Carrier



Split Chisel



4mm Straight SC-01
4mm Curved SC-02
6mm Straight SC-03
6mm Curved SC-04



3- Bone Expander Kit

کیت بن اکسپندر MCT (مسترکورت)

جهت افزایش عرض استخوان برای کاشت ایمپلنت در انواع مقعر و محدب میباشد که دارای دریلهای اکسپندر با قطرهای ۳/۸، ۳/۴، ۳/۵، ۲/۶، و ۴/۳ میلی میتر میباشد. این کیت دارای یک عدد دیسک آره ای با قطر ۷ میلیمتر میباشد جهت برش در سطح ریج استخوان. هرکدام از دریلهای اکسپندر را میتوان هم بصورت دستی هم با استفاده از رچت و هم با استفاده از اداپتور جهت بستن آن بروی موتور ایمپلنت استفاده کرد. این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail10.html>

Bone Expander

SBE-01

Composition of SBE-01



SBE-01 Bone Expander

Bone Expander

It used for single implant with narrow bone width or weak bone to expand bone or upgrade bone.

Pilot Drill / Bone Expander




3- Concave Bone Expander Kit

کیت های بن اکسپندر Convex و Concave جهت اکسپند کردن استخوان

این کیت ها شامل یک پایلوت دریل 1.8mm میباشد و یک دیسک اره ای با قطر 7 میلی و ارتفاع 22mm جهت برش در سطح ریج استخوان دارد. این کیتها شامل اداپتور دستی، موتوری و همچنین یک رچت میباشد. همچنین یک اداپتور موتوری جهت اکسپند کردن استخوان با موتور جراحی دارد

محصولات MCT دارای FDA آمریکا میباشد.

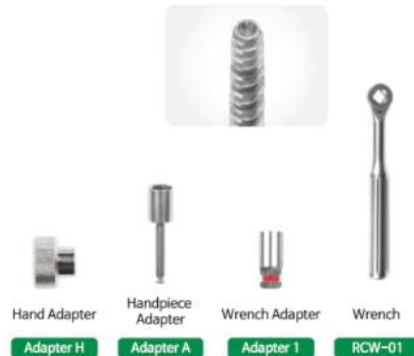

4-Bone Crester Kit

کیت بن کرستر

این کیت جهت افزایش عرض استخوان استفاده میشود.

این کیت شامل سه عدد اسپریدر و پیچهای مربوط به اسپریدرها میباشد.

همچنین این کیت شامل دو دیسک اره ای با قطرهای ۷ و ۱۰ میلی و طولهای ۲۲ میلی میباشد.

در این کیت با استفاده از دیسک های اره ای سطح ریج استخوان را برش داده و با استفاده از اسپریدر ها میتوان جداره های استخوان را از هم جدا کرد و پودر استخوان را تزریق کرد.

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail11.html>

Bone Crester

BCT-01

Composition of BCT-01



BCT-01 Bone Crester

Bone Crester

It maintains the initial fixing power of implant to increase success rate of implant without long stretched ridge when multi-implanting with narrow bone width.



5-Saw Cover Kit 2

این کیت دارای ۶ عدد دیسک اره ای جهت برش استخوان و دارای یک عدد Cover Saw به عنوان حفاظ برای دیسک ها میباشد.

این کیت ها در دونوع کاور هندپییسی و کاور دیسک جهت استفاده از آنکل میباشد.

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail12.html>

Saw Cover Set


SAW-SET

Composition of SAW-SET



SAW-SET Saw cover Set

Saw/Saw Cover Set

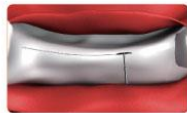

6-Split Chisel & Ochsenbein Chisel

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/general/detail/gendetail31.html>

Implant Instrument

Split Chisel


SPC-01 / SPC-02 / SPC-03 / SPC-04 / SPC-05

Characteristic of Split Chisel : It is 0.5mm thick used to widen narrow area in surgery.

Size of Split Chisel



Detail View

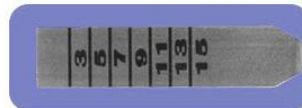

7-Bone Well & Mallet

<https://www.mctbio.com/general/detail/gendetail48.html>: لینک سایت

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail42.html>: لینک سایت

Implant Instrument

Bone Well

BOW-01 / BOW-02 / BOW-03 / BOW-04

Characteristic of Product

Bone Well used for bone mixing, Bone Well Lid prevents bone dry and contaminations during surgery time.

Description of Bone Well




General Instrument

Mallet

MLA-01

Detail View

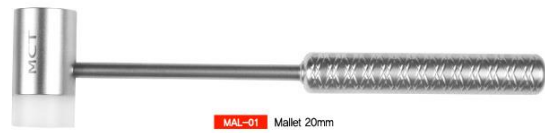

قسمة سوم

SPLITTING

1- Masi Drill Kit 4

کیت ماسایی دریل کیت

این کیت کاملاً شبیه به کیت سینوس مستر است و برای سینوس لیفت اپن و کلوز استفاده میشود. تفاوت این کیت با کیت سینوس مستر در دریل‌های سینوس اپن میباشد که در کیت سینوس مستر این دریل‌ها الماسی است و در این کیت بصورت مگنتی میباشد که در اثر فشار دست دیواره لترال آسیب نمیبیند. این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail5.html>

Masai Drill IV (Magnetic Sinus Artificial Intelligence Drill) MAS4-01

Composition of MAS4-01



MAS4-01 Masai Drill IV

Magnetic Drill



It is magnetic drill which delete maxillary bone without damage of sinus membrane. Using French Magnet which can beverse with 400°C, magnetic of drill is not change with subacute temperature.

Character of Magnetic Drill – Three Kinds Safety devices

1. Blade of drill have groove in the diamond bar, safety and cutting force is excellent, and even though drill reach sinus membrane, membrane is not damaged.
2. Masai drill are tripod against sill which made by initial drill, and even if pressed at moment of bone punching, masai drill did not go through into the hole.
3. At the moment of bone punching, upper part of masai drill was separate from the Lower part by magnet force and stop operate. It can perceive by hand, also can confirm through separation of gear.

Component



Initial Drill



Stopper



Aqua Tip



- Aqua Tip
1. After marking hole with Masai drill use aqua tip to fit up the membrane.
 2. Engage the Aqua tip onto the hole.
 3. Fill the syringe with saline water and join with hose.
 4. Place the syringe into the roller and stick the hose with Aqua tip.
 5. To fit up the membrane, turn the roller.

Direction for Use



2- Sinus Master Kit 3

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail53.html>: لینک سایت

Sinus Master III

SMK2-01

Composition of SMK3-01



SMK3-01 Sinus Master III

For Lateral and Crestal Sinus Lifting

1. A lateral Maxillary window can be created efficiently with the Lateral Drills,
 2. For Crestal approach, First use the Crest drill with appropriate depth stop until the last 1mm,
 3. Finish the last 1mm with Crest Reamer with 1mm depth stop attached,
- The Crest Reamer is made of diamond particles to avoid snagging the membrane,
4. Use sinus lift instruments to lift up the sinus membrane,

The Components



3- Hydro Lift System

کیت هیدرو لیفت سیستم

این کیت شامل یک اهرم دستی، یک شلنگ، یک سرنگ و ۶ عدد رابط Aqua با قطرهای ۲.۶ و ۳.۰ و ۳.۳ و ۳.۵ و ۳.۸ و ۴.۰ می باشد.

این رابطها داخل ساکت قرار گرفته و یکسر آن به شلنگ متصل شده است و سر دیگر شلنگ را به سرنگ وصل میکنیم. سپس سرنگی که حاوی آب میباشد را داخل اهرم دستی گذاشته و سپس با استفاده از پیچ اهرم آب را آهسته آهسته و بصورت کنترل شده از طریق رابطها وارد سینوس کرده تا سینوس آسیب جدی نبیند.

این سیستم همچنین شامل یک آداپتور برای جاهایی که دسترسی دشوار است، میباشد.

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail7.htm>

Hydro Lift System

WSL-01

Composition of WSL-01



WSL-01 Hydro Lift System

Aqua Tip

1. Maxillary sinus membrane can be easily by hydrostatic pressure.
2. Various size of aqua tip(2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.8, 4.0)
3. Compatible to a variety of maxillary sinus elevation drill.
4. Sanitary membrane elevation due to use of a disposable syringe
5. Because treatment of creastal approach is possible within 3mm in residual bone, the time and cost is reduced.
6. Desired amount of bone can be easily implanter.

Hydro Lift System



WSL-01-01



WSL-01-02




WSL-01-2.8



WSL-01-3.0



WSL-01-3.3

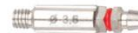


WSL-01-3.6



WSL-01-3.8



WSL-01-4.0

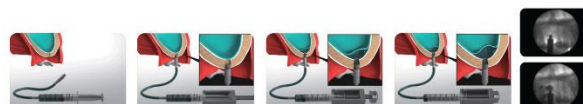

4-Osteotome-Rigid / Thermos

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail34.html>: لینک سایت

Implant Instrument

Osteotome – Rigid, Thermos, Gaori

OSR-SET / OST-SET / OSG-SET

Characteristic of Osteotome



Detail of Rigid Set



Detail of Thermos Set



Detail of Gaori Set




5-Sinus Lift & Sinus Lift Crestal

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail31.html>: لینک سایت

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail32.html>: لینک سایت

General Instrument Sinus Lift YSL-01 / YSL-02 / YSL-03 / YSL-04 / YSL-05

Detail View

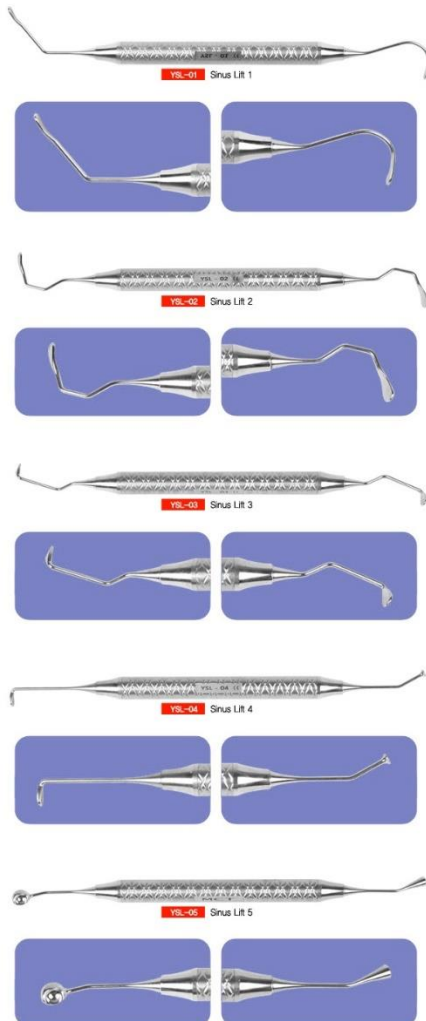

General Instrument Sinus Lift Crestal

SLC-01 / SLC-02 / SLC-03 / SLC-04

Detail View



قسمت چہارم

RESCUE

1- Fixture & Screw Rescue Master

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail3.html>: لینک سایت

<https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail4.html>: لینک سایت

Screw Remover Kit

SRK-01

Composition of SRK-01



SRK-01 Screw Remover Kit

Fixture Remover Kit

FRK-01

Composition of FRK-01



FRK-01 Fixture Remover Kit

Screw Remover Kit

1. Pick certain guide for used abutment.
2. Attach the guide and hold it with guide holder.(SRG-H)
3. Use screw remover drill to make hold in the core of broken screw in reverse way.
4. Use Tap drill to remove the broken screw in reverse way.



FRD-01(3EA)



Fixture Remover Kit

1. Excellent combination of Remover and Trophine Bar
2. Trophine bar that can remove implant without bone loss.
3. One remover applicable to all sizes of implants
4. Solid durability



FRW-01



2- Fixture & Screw Removal Kit

کیت فیکسچر اسکرو ریمووال

این کیت برای جدا کردن اسکرو شکسته و جدا کردن فیکسچر از استخوان استفاده میشود.

در این کیت میتوان با استفاده از ترفاین های تعبیه شده یک سوم استخوان را برداشت و سپس با استفاده از رابطهای فیکسر ریمووال که برای فیکسچرهای میننی و رگولار و واید طراحی شدن فیکسچر را از استخوان جدا کرد.

در این کیت دریلهای اسکرو ریمووال جهت شکستن پیچ اباتمنت و همچنین دریل های Tap جهت در آوردن اسکرو شکسته وجود دارد.

در این کیت جهت در آوردن اسکرو شکسته گایدهایی طراحی شده که برای انواع سیستم های کره ای و اروپایی و امریکایی کاربرد دارند.

این محصول کره ای و دارای FDA آمریکا میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail2.html>

Fixture & Screw Removal Master (Rescue Master Kit)



Fixture & Screw
Removal Master

F5Rk-02



Fixture & Screw Removal Master
(Rescue Master Kit)

The Components

Fixture Removal Drill



Screw Removal Drill & Tap



Screw Removal Guide



F5Rg-01

Fixture Removal Trephine Bur



S5Rt-01



Adapter11



3-Tissue Punch & Trephine Bur & Saw

کیت تیشو پانچ و ترفاین MCT (مسترکورت)

این کیت شامل ۴ عدد تیشو پانچ با قطرهای ۴/۴، ۵/۰، ۵/۵، ۵/۰، ۵/۰ میلی متر و ۴ عدد ترفاین با قطرهای ۰/۰، ۸/۰، ۷/۰، ۶/۵ میلی متر جهت برداشتن استخوان بصورت بلاک میباشد. همچنین این کیت شامل دو عدد دیسک اره ای با قطرهای ۷ و ۱۰ میلی متر و طولهای ۲۲ میلی متر میباشد جهت برش استخوان. این کیت کره ای و دارای FDA امریکا میباشد.

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail20.html>

Mini Tissue Punch & Trephine Bur & Saw Set

TAT-02

Composition of TAT-02



TAT-02 Tissue Punch & Trephine Bur & Saw Set

Tissue Punch



Ø4.0 TIP-4,0
Ø4.5 TIP-4,5
Ø5.0 TIP-5,0
Ø5.5 TIP-5,5

Trephine Bur



Ø5.0 TPL-05
Ø6.0 TPL-06
Ø7.0 TPL-07
Ø8.0 TPL-08

Saw



Ø7 SAW-01
Ø10 SAW-02



4- Tissue Punch

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail24.html>

Implant Instrument

Tissue Punch

TIP-3.5 / TIP-4.0 / TIP-4.5 / TIP-5.0 / TIP-5.5 / TTI-4.0 / TTI-5.0

Issue Punch



Ø3.5

TIP-3.5



Ø4.0

TIP-4.0



Ø4.5

TIP-4.5



Ø5.0

TIP-5.0



Ø5.5

TIP-5.5

Issue Punch (Special Type)



Ø4.0

TTI-4.0



Ø5.0

TTI-5.0



5- Trepine Bur

لینک سایت: <https://www.mctbio.com/implant/detail/impdetail23.html>

Implant Instrument

Trepine Bur

TPB-3 / TPB-4 / TPB-5 / TPB-6 / TPB-7 / TPB-8
TPL-3 / TPL-4 / TPLB-5 / TPL-6 / TPL-7 / TPL-8

■ Trepine Bur



Ø3
TPB-3



Ø4
TPB-4



Ø5
TPB-5



Ø6
TPB-6



Ø7
TPB-7



Ø8
TPB-8

■ Trepine Bur Long type



Ø3
TPL-3



Ø4
TPL-4



Ø5
TPL-5



Ø6
TPL-6



Ø7
TPL-7



Ø8
TPL-8



6-M-toque Driver Kit

- Great for hard to reach areas near molars
- Adjustable Torque between 10-40Ncm
- Accepts all Standard Contra Angle Drivers
- Simply spin the back section of the handle to select the torque value, then twist the whole handle to torque
- Two piece construction: Torque handle and handpiece attachment
- Includes a 0.050 Hex Driver



TH-01



TD-01



TH-01



TD-01



7-Implant Guide Kit

- Allows a mesio-distal guidance when placing implants
- Components
 - 5 Guides
 - 5 Posts
 - 4 Drills
- Standard Kit Components
 - Guides
 - (1) 6mm Guide
 - (1) 7.5mm Guide
 - (1) 9mm Guide
 - (1) 10.5mm Guide
 - (1) 12mm Guide
 - Posts
 - (1) 6mm Post
 - (1) 7.5mm Post
 - (1) 9mm Post
 - (1) 10.5mm Post
 - (1) 12mm Post
 - Drills
 - (1) 4mm Drill
 - (1) 5mm Drill
 - (1) 8mm Drill
 - (1) 10mm Drill

Implant Guide Kit

Short time for implant The application of all charge drills.
 Strong durability against heat.
 Simple to use multiple implant.

Implant Guide Kit

IGK-01



Guide

Post

Drill



قسمت پنجم


Orthodontists

1- Orthodontic Screw Set

https://www.mctbio.com/Orthodontic/Oracle/Oracle_4.html: لینک سایت
https://www.mctbio.com/Orthodontic/Oracle/Oracle_3.html: لینک سایت
https://www.mctbio.com/Orthodontic/Oracle/Oracle_2.html: لینک سایت
https://www.mctbio.com/Orthodontic/Oracle/Oracle_1.html: لینک سایت

OA

For Elastic Band and Wire

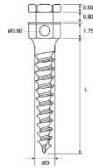

(Product List)

Code	D X L
OA - 14 - 006	Ø1.4 X 6
OA - 14 - 008	Ø1.4 X 8
OA - 14 - 010	Ø1.4 X 10

Code	D X L
OA - 16 - 006	Ø1.6 X 6
OA - 16 - 008	Ø1.6 X 8
OA - 16 - 010	Ø1.6 X 10

Code	D X L
OA - 18 - 006	Ø1.8 X 6
OA - 18 - 008	Ø1.8 X 8
OA - 18 - 010	Ø1.8 X 10



Mini Orthodontic Screw Master OA
(Screw 54EA)
Ø1.4(18EA)/Ø1.6(18EA)/Ø1.8(18EA)

MCA-01

SA

For Elastic Band



(Product List)

Code	D X L
SA-HS-14-006	Ø1.4 X 6
SA-HS-14-008	Ø1.4 X 8
SA-HS-14-010	Ø1.4 X 10

Code	D X L
SA-HS-16-006	Ø1.6 X 6
SA-HS-16-008	Ø1.6 X 8
SA-HS-16-010	Ø1.6 X 10

Code	D X L
SA-HS-18-006	Ø1.8 X 6
SA-HS-18-008	Ø1.8 X 8
SA-HS-18-010	Ø1.8 X 10

Code	D X L
SA-HS-20-006	Ø2.0 X 6
SA-HS-20-008	Ø2.0 X 8
SA-HS-20-010	Ø2.0 X 10



Mini Orthodontic Screw Master SA
(Screw 54EA)
Ø1.4(18EA)/Ø1.6(18EA)/Ø1.8(18EA)

MCA-01

TINY

Small Head



(Product List)

Code	D X L
THS-12-006	Ø1.2 X 6
THS-12-008	Ø1.2 X 8

Code	D X L
THS-14-006	Ø1.4 X 6
THS-14-008	Ø1.4 X 8
THS-14-010	Ø1.4 X 10

Code	D X L
THS-16-006	Ø1.6 X 6
THS-16-008	Ø1.6 X 8
THS-16-010	Ø1.6 X 10



Mini Orthodontic Screw Master Tiny
(Screw 48EA)
Ø1.2(12EA)/Ø1.4(18EA)/Ø1.6(18EA)

MTI-01

OS

For Elastic Band and Wire



(Product List)

Code	D X L
OS-HS-14-006	Ø1.4 X 6
OS-HS-14-008	Ø1.4 X 8
OS-HS-14-010	Ø1.4 X 10

Code	D X L
OS-HS-16-006	Ø1.6 X 6
OS-HS-16-008	Ø1.6 X 8
OS-HS-16-010	Ø1.6 X 10

Code	D X L
OS-HS-18-006	Ø1.8 X 6
OS-HS-18-008	Ø1.8 X 8
OS-HS-18-010	Ø1.8 X 10

Code	D X L
OS-HS-20-006	Ø2.0 X 6
OS-HS-20-008	Ø2.0 X 8
OS-HS-20-010	Ø2.0 X 10



Mini Orthodontic Screw Master OS
(Screw 54EA)
Ø1.4(18EA)/Ø1.6(18EA)/Ø1.8(18EA)

MOS-01





2-Orthodontic Tool Set

https://www.mctbio.com/Orthodontic/Oracle/Oracle_6.html: لینک سایت

TOOLS


Shafts

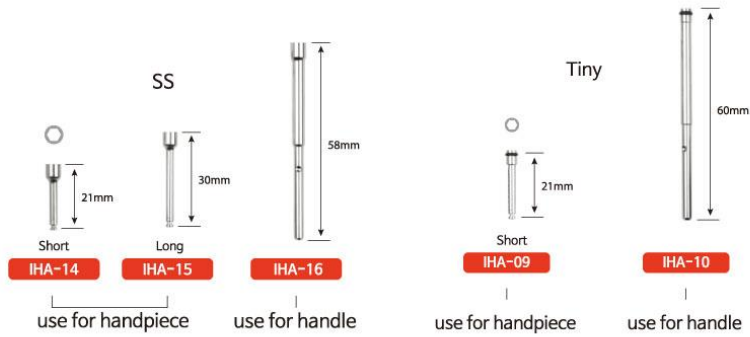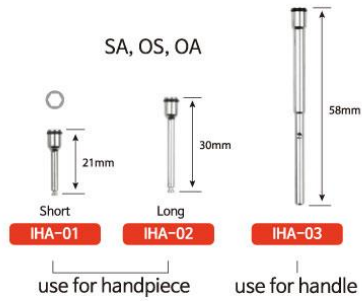

Drivers



Pilot Drills

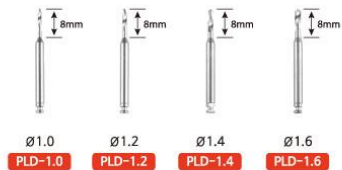


3-Orthodontic Plate Set

مرجع کاتالوگ نسخه ۲۰۱۴ صفحه ۱۸

ORTHOPLATE Ahn's Anchorage System



AAS-01 Ahn's Anchorage System

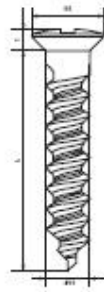

Code	D1	D2	L
AL-16-006	1.6mm		6
AL-16-008	1.6mm		8
AL-16-010	1.6mm		10
AL-18-006	1.8mm	3.0mm	6
AU-18-008	1.8mm		8
AU-18-010	1.8mm		10
AL-20-006	2.0mm		6
AL-20-008	2.0mm		8
AL-20-010	2.0mm		10

L-Plate

Retraction of anterior teeth on buccal side



A-F-690(M)

T-Plate

Intrusion of upper anterior teeth



A-F-690(B)

A-F-690(C)

Palatal Plate

Distalization of upper molars

Retraction of anterior teeth in lingual orthodontics



A-F-690(P1)



A-F-690(P2)

Modified L-Plate

Retraction of lower posterior teeth

Retraction of single molar



A-F-690(S2-Q)



A-F-690(S2-R)

L-Plate

Intrusion of molars with L-plate



A-F-690(S3-Q)



A-F-690(S3-R)

